

SUCTRON PREMIUM

Bomba de Vácuo

SCHUSTER
.ind.br

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



! **IMPORTANTE**
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

1. APRESENTAÇÃO	3
1.1 Vida útil do equipamento	3
2. INTRODUÇÃO	3
3. TERMOS DE GARANTIA	3
4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS.....	3
4.1 Gráficos.....	3
4.2 Descrição	4
4.3 Indicações de uso	4
5. INSTALAÇÃO	4
5.1 Instalação elétrica.....	4
5.2 Instalação da bomba de vácuo Suctron Premium.....	4
5.3 Instalação do Kit Suctor/unidade auxiliar	6
5.4 Procedimentos finais antes de acionar o equipamento	7
5.5 Teste de eficiência da sucção	7
6. FUNCIONAMENTO OPERACIONAL.....	7
7. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA	8
8. DADOS TÉCNICOS	8
8.1 Simbologias da embalagem	8
8.2 Simbologias do produto	8
8.3 Conteúdo das marcações acessíveis	9
9. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM SUCTRON PREMIUM.....	9
10. FALHAS, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES	9
11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.....	9

PARABÉNS!

O aparelho que você acaba de adquirir foi projetado de modo a proporcionar o melhor rendimento.

Este chegou até você, após ser inteiramente aprovado nos testes de qualidade feitos na fábrica e é resultado de experiência e know-how na fabricação de equipamentos periféricos odontológicos.

Antes de ligar o aparelho, leia com atenção as instruções contidas neste manual, assim você evitará erros na operação e garantirá o perfeito desempenho da sua SUCTRON PREMIUM.

1. APRESENTAÇÃO

Este manual tem por finalidade, esclarecer o funcionamento deste aparelho, bem como os cuidados necessários para que este tenha maior vida útil.

As especificações e informações contidas neste manual baseiam-se em dados existentes na época de sua publicação.

Reservamo-nos o direito de introduzir modificações a qualquer momento, sem aviso prévio.

1.1 Vida útil do equipamento

A vida útil estimada da Bomba de Vácuo Suctrion Premium é de 10 (dez) anos para utilização normal, desde que submetido à manutenção preventiva regular, e NÃO sejam usados e instalados componentes de terceiros no equipamento, sem que estejam homologados pela Schuster.

2. INTRODUÇÃO


A Schuster, sempre no intuito de facilitar o trabalho do profissional na área odontológica, desenvolveu a linha SUCTRON, suctores cirúrgicos e clínicos de alta potência (bomba à vácuo). Estes têm por finalidade aspirar de forma consistente os resíduos como sangue, saliva e outros que estiverem no campo operatório, tratamentos profiláticos, clínicos, etc., eliminando-os diretamente ao esgoto sem a necessidade de reservatório. Mesmo no caso hemorrágico ou de um grande volume de irrigação de água, a sua eficaz sucção faz com que aumente consideravelmente o campo visual. Outro fator de extrema importância é com o que diz respeito a contaminação através de vírus e bactérias expelidos pela névoa formada pelo spray dos instrumentos. Com o SUCTRON, esta névoa é sugada, fazendo com que a assepsia da cavidade oral bem como, próximo ao campo de trabalho, tenha os melhores resultados proporcionando uma maior segurança ao paciente e para o profissional (cirurgião-dentista).

3. TERMOS DE GARANTIA

Verificar o certificado de garantia que acompanha o aparelho.

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

4.1 Gráficos

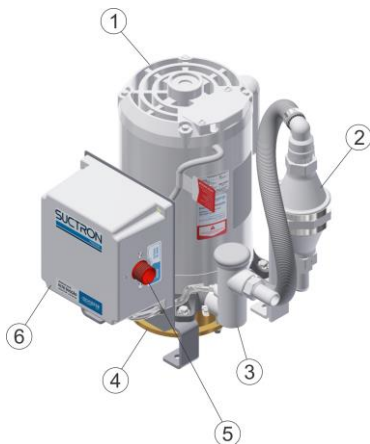

1. Motor de 1,5 CV 2P.	4. Turbina em bronze.
2. Silenciador.	5. Válvula solenoide.
3. Filtro coletor de resíduos.	6. Comando de acionamento eletrônico.

4.2 Descrição

Equipamento de sucção de alta potência (bomba de vácuo) para uso odontológico composto de:

Motor de 1,5 CV 2P com eixo central em inox;

Turbina em bronze;

Silenciador;

Filtro coletor de detritos com abertura superior, evitando contato com os resíduos;

Válvula solenoide que corta e libera instantaneamente a passagem de água;

Comando de acionamento eletrônico com exclusivo "Temporizador de Varredura", sistema que ao colocar o Suctor no suporte do Kit Suctor/unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna.

4.3 Indicações de uso

Aspiração de forma consistente de resíduos como sangue, saliva e outros que estiverem no campo operatório, tratamentos profiláticos, clínicos, etc., eliminando-os diretamente ao esgoto sem a necessidade de reservatório.

5. INSTALAÇÃO

5.1 Instalação elétrica

A. É obrigatória a instalação de um disjuntor exclusivo na caixa de distribuição para a tomada onde será conectada a Sucatron Premium;

B. Plug utilizado neste equipamento é Bipolar + Terra, 20 Amperes/250 Vca e com três pinos redondos de Ø4,8mm (NBR 14136:2002);

C. O aterramento deverá ser ligado no pino redondo central e fase/fase ou fase/neutro nos pinos redondos laterais.

Obs: Nunca ligar o aterramento no neutro.

Importante:

Utilizar tomada compatível com o plug descrito acima, ou seja, com três furos fêmea (bipolar + terra), 20 Amperes/250 Vca, para pinos redondos com Ø4,8mm (NBR 14136:2002).

TABELA DE DIMENSIONAMENTO FIAÇÃO/DISJUNTOR

FIO RÍGIDO (mm ²)						DISJUNTOR (A)	
127V			220V			127V	220V
4mm ²	4mm ²	6mm ²	1,5mm ²	2,5mm ²	4mm ²		
D=15m	D=30m	D=45m	D=15m	D=30m	D=45m	32A	16A

D=distância em metros entre o disjuntor e a tomada.

Observação:

Em regiões de 220V.

FF (Fase-Fase) – utilizar disjuntor "bipolar".

FN (Fase-Neutro) – utilizar disjuntor "unipolar".

5.2 Instalação da bomba de vácuo Sucatron Premium

A instalação deste equipamento somente deverá ser feita por uma Assistência Técnica Credenciada SCHUSTER, sob pena de perda da garantia.

Caso não houver na sua região, entrar em contato com o nosso departamento técnico.

Todos os modelos de bombas de vácuo Sucatron são compatíveis com qualquer marca de consultório odontológico.

Observação:

O rendimento de uma bomba de vácuo esta diretamente associada ao número de consultórios e a **distância da tubulação de sucção**, onde estas deverão seguir rigorosamente os critérios do fabricante:

Suctron Pratic – capacidade para 1 consultório com instalação ao lado da cadeira (caixa de comando);

Suctron Eletronic Plus – capacidade para 2 consultórios;

Suctron Eletronic – capacidade para 5 consultórios;

Suctron Premium – capacidade para 7 consultórios.

Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com nosso departamento técnico.

Procedimentos:


1.	Retirar a tampa de proteção superior da embalagem interna de EPE.
2.	Retirar a SUCTRON de dentro da caixa de papelão.
3.	Colocar os 4 (quatro) pés completos de borracha nos furos de fixação localizados na base de sustentação.
4.	Verificar a voltagem da rede local onde será instalada a bomba de vácuo.
5.	IMPORTANTE! Abrir a caixa de comando retirando os quatro parafusos e verificar no seu interior os “procedimentos para a ligação da voltagem desejada na Suctron Premium” . Seguir as orientações destes procedimentos.
6.	<p>Temporizador de varredura – exclusividade Schuster</p> <p>Sistema que ao colocar o suctor no suporte do Kit Suctor/unidade auxiliar, a sucção permanece por aproximadamente 15 segundos a fim de limpar toda a tubulação interna.</p> <p>Este sistema poderá ser ativado durante a instalação do equipamento ou posteriormente.</p> <p>Como acionar o temporizador: Posicionar o jumper J2 localizado na PCI de acionamento conforme ilustração abaixo.</p> <p style="text-align: center;">Temporizador de varredura</p> <div style="display: flex; align-items: center;"><div style="margin-left: 20px;"><p>Temporizador desligado</p><p>Temporizador ligado</p></div></div>

Observação:

Consultar o proprietário do equipamento a fim de certificar-se que o mesmo queira acionar ou não o temporizador de varredura.

Na posição original de fábrica o temporizador está desligado.

7.

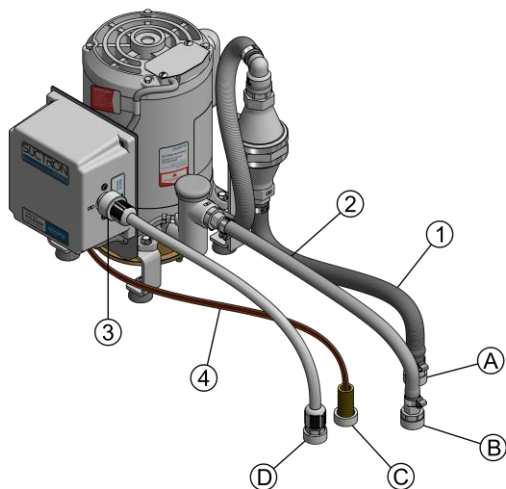

Rosquear a entrada de água de 1/2" na espera (ponto "D"- Água) rente ao piso e a de 3/4" na conexão de "Entrada Água" (Nº 3) na SUCTRON.

Conectar o mangote na saída do Silenciador (Nº 1) e rosquear este na espera (ponto "A"- Esgoto) rente ao piso.

Rosquear a luva de PVC 3/4" na espera (ponto "B"- Sucção) rente ao piso e conectar o mangote no terminal de sucção da SUCTRON (Nº 2). Observar documentação, Planta de Locação e Ligação Bomba de Vácuo Suctron, em anexo no final deste manual.

Ligação elétrica para acionamento da Suctron através do comando dos sugadores

Conectar o cabo elétrico (Nº 4) na placa de acionamento localizada no interior da caixa de comando da Suctron Eletronic.

As saídas para o acionamento da bomba de vácuo através do Kit Suctor/unidade auxiliar estão numeradas (1, 2 e 3).



1 e 2 – Acionamento da Suctron através das microchaves localizadas no suporte do Kit Suctor/unidade auxiliar.

2 e 3 – Saída 24 Vca para alimentação do led indicativo do Kit Suctor/unidade auxiliar.

Observação: Cabo elétrico (Nº 4) – 3 fios de 0,75mm² com cores diferentes.

5.3 Instalação do Kit Suctor/unidade auxiliar

- Kit Suctor Suctron (acessório opcional):
Consultar o manual de operação/instalação que acompanha o Kit Suctor;
- Unidade Auxiliar do conjunto odontológico com terminal próprio para receber a bomba de vácuo Suctron;
Consultar o manual de operação/instalação do fabricante.

5.4 Procedimentos finais antes de acionar o equipamento

A. **IMPORTANTE:**

Verificar se a ligação da voltagem da mesma corresponde a da rede elétrica. Conectar o cabo de força da bomba de vácuo na rede elétrica;

B. Observar se os terminais de sucção do Kit Suctor/unidade auxiliar estão nos devidos suportes;

C. Verificar se está aberto o registro de água da rede geral;

D. Acione a SUCTRON retirando um dos terminais de sucção dos suportes do Kit Suctor/unidade auxiliar.

Obs: Quando acionada, o LED no painel do Kit Suctor deverá acender.

Importante!

Após a instalação, medir a vazão de água na saída do silenciador (nº 2).

Caso haja necessidade de uma nova regulagem, fechar totalmente o registro de água (Fig. 1) e abrir gradualmente o mesmo medindo a vazão de água na saída do silenciador até que a vazão verificada seja em torno de 700 a 800 ml/minuto.



Fig.1

5.5 Teste de eficiência da sucção

Após a instalação, sugar, através dos registros suctores (sugadores), 1 litro de água a fim de verificar o tempo necessário de sucção.

Tempo normal de sucção: Até 10 segundos.

Caso o tempo seja superior a 10 segundos, revisar os processos de instalação, bem como a rede hidráulica.

6. FUNCIONAMENTO OPERACIONAL

A. Retirar o registro suctor do suporte do Kit Suctor/unidade auxiliar, a bomba de vácuo é acionada automaticamente;

B. O registro suctor que permanecer no suporte deverá ficar totalmente fechado, sendo que, o que estiver em uso deverá ficar aberto de acordo com a sucção desejada;


C. Após o uso, feche e coloque o registro suctor no suporte, sendo que a bomba de vácuo desligar-se-á automaticamente;

Observação:

Caso o temporizador de varredura estiver acionado, a Suctron irá desligar-se com um retardo de aproximadamente 15 segundos.

D. Para prevenir danos que possam ocorrer durante os períodos em que o profissional não estiver trabalhando, recomenda-se após o expediente, fechar o registro de água da rede urbana e desligar os disjuntores (rede elétrica).







7. MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ASSEPSIA

A	Retirar a tampa do filtro de resíduos (1) localizada na entrada de sucção na Sucatron Premium.	
B	Retirar a tela coletora (2) e limpar com água corrente, após recolocá-lo no lugar. Esta poderá ser escovada com água e sabão neutro;	
C	<p>Sugar diariamente 1 litro de água adicionada a um detergente enzimático ou multienzimático e posteriormente uma solução desinfetante específica para suctores odontológicos, produtos estes comercializados nas principais dentais. A diluição dos mesmos deve seguir a orientação do fabricante.</p> <p>Importante: - A cada 100ml dar um intervalo de aproximadamente 10 segundos. - Não utilizar produtos a base de cloro na limpeza da tubulação (em todo sistema a vácuo); Ex.: água sanitária.</p>	
D	A limpeza externa da Sucatron Premium e do gabinete deverá ser feita com um pano limpo e úmido e detergente neutro.	

8. DADOS TÉCNICOS

Altura: 37,5 cm (com gabinete); 35,0 cm (sem gabinete)	Peso líquido: 20,2 Kg
Comprimento: 30,0 cm (com gabinete); 27,5 cm (sem gabinete)	Potência do motor: 1,5CV
Largura: 31,0 cm (com gabinete); 30,0 cm (sem gabinete)	Corrente: 20A (127V) - 9A (220V)
Tensão: Bivolt 127V~ - 60Hz 220V~ - 60Hz	Nível de ruído: 67dB
Pressão de Operação (entrada de água): De 0,2 a 4,5 kgf/cm ²	

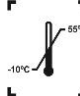8.1 Simbologias da embalagem


	Indica que a embalagem é frágil e deve ser armazenada e transportada com cuidado.		Indica que a embalagem deve ser armazenada ou transportada com o lado da seta para cima.		Indica os limites de temperatura que a embalagem deve ser armazenada ou transportada.
	Indica que a embalagem deve ser armazenada e transportada protegida da luz.		Indica que a embalagem deve ser armazenada ou transportada protegida da chuva (umidade).		Indica a quantidade máxima de caixas que podem ser empilhadas no transporte e armazenamento.

8.2 Simbologias do produto



Símbolo de consulta ao manual/livreto de instruções.

8.3 Conteúdo das marcações acessíveis

SCHUSTER SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA BR 168, Nº 2121 - Santa Maria - RS - Brasil	
APARELHO BOMBA À VÁCUO SUCTION PREMIUM 127V - 60Hz 220V - 50/60Hz	N/S ????????
FAB ????????	REG ANVISA Isento
LOTE ????????	
Características Técnicas/ Condições Especiais de Armazenamento/ Conservação/ Manipulação/ Instruções Especiais de Uso/ Advertências/ Precauções "Ver Manual do Proprietário".	

9. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM SUCTION PREMIUM

- 01 Mangueira para ligação no esgoto;
- 01 Mangueira para ligação na sucção;
- 01 Mangueira para ligação na entrada de água;
- 04 Pés amortecedores.

10. FALHAS, POSSÍVEIS CAUSAS E SOLUÇÕES

Antes de consultar a Assistência Técnica, verificar as possíveis causas e suas soluções na tabela abaixo:

FALHA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
• A bomba não suga.	<ul style="list-style-type: none">Falta de água na rede urbana.Filtro de resíduos entupido.Tampa do filtro de resíduos aberta.	<ul style="list-style-type: none">Aguardar normalização.Retirar e lavar (item 7).Fechar a tampa.
• A bomba não liga.	<ul style="list-style-type: none">Plug fora da tomada.Disjuntor desarmado.Falta de energia elétrica.	<ul style="list-style-type: none">Conectar o plug.Armar o disjuntor.Aguardar normalização.

Para consulta sobre Assistência Técnica Credenciada Schuster na sua região, acessar o site www.schuster.ind.br, ou entre em contato com nosso departamento técnico fone (55) 3222-2738.

11. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Temperatura ambiente (operação): 5°C a 40°C;**
- Temperatura ambiente (transporte e armazenagem): -10°C a 55°C;**
- Umidade relativa do ar (operação): ≤ 80%;**
- Umidade relativa do ar (transporte e armazenagem): 0% a 85%;**
- Pressão atmosférica: 70kPa a 106kPa;**
- Empilhamento máximo: 3 unidades.**

Cuidados especiais:

- Embalagem com o lado da seta para cima;**
- Armazenar em locais isentos de umidade;**
- Cuidar quedas ou batidas.**

SUCTRON PREMIUM

Suctor de alta potência (bomba de vácuo)

Cód. produto 29.000

Produzido e distribuído por:

Schuster Comércio de Equipamentos

Odontológicos Ltda

BR 158, nº 2121 Parque Pinheiro

Machado

Santa Maria, RS, Brasil 97030-660

C.G.C.: 93.185.577/0001-04

“Declarado Isento de Registro pelo
Ministério da Saúde”

Responsável Técnico:

Jozy Gaspar Enderle

CREA: 70892d

Alguma Dúvida?

Entre em contato




+55 (55) 3222.2738






Revisão: 13

Data Rev.: 07/02/2024


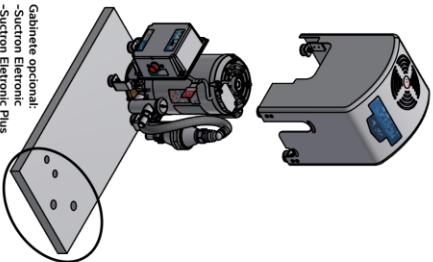


Gabinete optionat:
-Suction Electronic Plus
-Suction Premium

Gabinete:
-Suction Practic

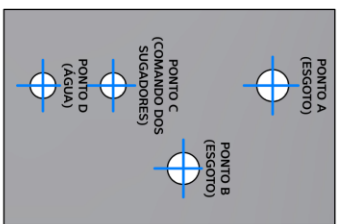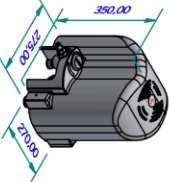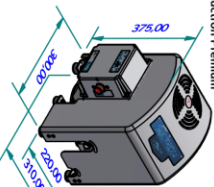

Escala 1 : 4

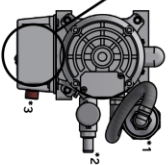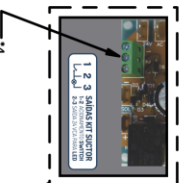


Nº	Componentes
1	3 Fios Ø0,75mm ² (em cores diferentes)
2	Luva soldável c/ bucha de latão Ø20x1/2"
3	Luva soldável c/ bucha de latão Ø25x3/4"
4	Curva 90° soldável Ø25mm
5	Joelho 90° soldável Ø25mm
6	Tubo PVC rígido soldável Ø20mm
7	Tubo PVC rígido soldável Ø25mm
8	Tubo PVC rígido soldável Ø40mm
9	Luva de redução soldável longa Ø40x25mm
10	Eletroduto flexível corrugado Ø20mm


Salida da Bomba	Ponto de ligação
*1	Ponto A (Esgoto)
*2	Ponto B (Sucção)
*3	Ponto D (Água)
*4	Ponto C (Comando dos Sugadores)

Altura do equipamento	Altura Total
Bomba s/ Gabinete	350 mm
SPREM	330 mm
SE	330 mm
SEP	320 mm

Ponto A (Esgoto) - Tubo de PVC soldável Ø40mm (8). Luva de redução soldável Ø40x25mm (9). Curva 90° soldável Ø25mm (10). Joelho 90° soldável c/ bucha de latão Ø25x3/4" (5); remite ao piso.
Independente, ligado à Caixa sifonada.
Ponto B (Sucção) - Tubo de PVC soldável Ø25mm (7). Curva 90° soldável Ø25mm (4). Terminando 50mm acima do piso, com fios 3x0,75mm² (cores diferentes) com Ø00mm acima do eletroduto para ligação na Bomba de Vácuo, sendo a outra extremidade ligado ao ponto correspondente na Caixa de Ligação do Equip.
Ponto D (Água) - Tubo de PVC soldável Ø20mm (6). Joelho 90° soldável Ø20mm (5), terminado em luva soldável c/ bucha de latão Ø20x1/2" (2), remite ao piso, ligado à rede de água.
Obs.: Nas tubulações de sucção, evitar conexões com ângulos retos. Dar preferência a conexões com ângulos de 45° e/ou curvas suaves para otimizar o vácuo.

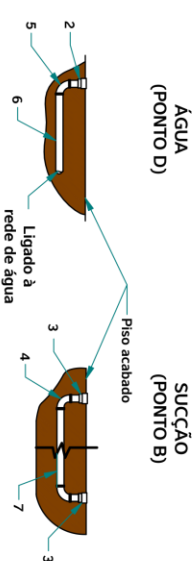

COMANDO DOS SUGADORES (Ponto C) Esgoto (Ponto A)

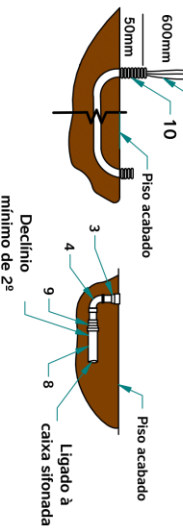

SCHUSTER

ELAB:	17/02/2021	William	UNIDADE:	mm
ALTER: <td>20/10/2022</td> <td>Beno</td> <td>ESCALA: <td>1 / 4</td> </td>	20/10/2022	Beno	ESCALA: <td>1 / 4</td>	1 / 4
APROV: <td>20/10/2022</td> <td>Rabson</td> <td>REV: <td>04/22</td> </td>	20/10/2022	Rabson	REV: <td>04/22</td>	04/22

Planta de Localização e Ligação Bomba de Vácuo Suctron

**Consciência ambiental é um dos
nossos pilares centrais.
Portanto, o cuidado com o
planeta virou nossa prioridade.**



A logística reversa das nossas embalagens, que anualmente chega a 36 toneladas, passou a ser certificada pelo selo Eureciclo.

O Selo Eureciclo é a garantia de que a nossa marca investe no desenvolvimento das cadeias de reciclagem, destinando recursos para o desenvolvimento e operação das cooperativas recicladoras, garantindo a compensação ambiental sobre o impacto gerado, em busca de um modelo cada dia mais sustentável em harmonia com o meio ambiente e com a responsabilidade social.

Conheça o projeto Eco Schuster através das nossas páginas e venha fazer parte da mudança que o mundo precisa.

Siga [schusternaweb](#) no Instagram ou Facebook e assista nossos vídeos no Youtube.



NÚMERO DE SÉRIEAparelho: **BOMBA À VÁCUO SUSTRON**Modelo: **PREMIUM**

Nota Fiscal Nº:

Data da Venda: / /

Comprador:

CPF/CNPJ:

Fone:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

TERMOS DE GARANTIA

1 - A SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., responde pela qualidade e perfeito funcionamento do aparelho, pelo prazo de garantia especificado abaixo, incluindo o período de garantia legal de 90 dias (3 meses) e garantia contratual de 9 meses, contados a partir da data da compra, devidamente comprovada pela respectiva nota fiscal.

2 - TEMPO DE GARANTIA:**03 MESES** - filtro copo tela e mangueiras.**06 MESES** - placa eletrônica, válvula entrada de água e bobina, transformador, motor.**12 MESES** - demais itens.

3 - As despesas para a instalação do equipamento serão exclusivamente por conta do comprador. A garantia não exime o cliente do pagamento da taxa do serviço pela visita e despesas de locomoção do técnico para consertos em garantia, bem como as despesas de frete para o envio de equipamentos para conserto na fábrica ou para a assistência Credenciada. «Código de Defesa do Consumidor - Art. 50, parágrafo único». O prazo de garantia não será estendido em função do conserto do aparelho.

4 - Perda de Garantia:

A garantia se limita ao reparo ou substituição de peças com defeito de fabricação, devidamente constatado pelo técnico credenciado Schuster.

A garantia será nula devido:

4.1 Instalação do equipamento por técnico não credenciado;

4.2 Tentativa de reparo através de ferramentas inadequadas ou pessoas e/ou técnicos não autorizados;

4.3 Danos provenientes de armazenamento inadequado ou sinais de violação;

4.4 Uso de produto de limpeza não indicado pela fábrica;

4.5 Uso incorreto no manuseio e operação do equipamento;

4.6 Causa do defeito for motivo de quebra ou batidas, instalação em rede elétrica imprópria (tensão diferente da especificada para funcionamento), sujeita a flutuações na rede elétrica ou sem aterramento adequado;

4.7 Ação de agentes da natureza;

4.8 Operação em desacordo com o manual;

4.9 Produto sofrer modificações por técnico não credenciado ou tiverem sido instaladas peças não originais;

5 - O certificado de Garantia só terá validade quando acompanhado da nota fiscal de compra e, o mesmo deverá ser preenchido na data de instalação, pelo técnico credenciado Schuster.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

* Assistência Técnica Credenciada:

* CNPJ:

* Data da Instalação: / /

* Técnico Responsável pela Instalação:

* Dados obrigatórios para a garantia